

組合せ家庭用電気治療器  
(電位治療器・温熱治療器・電気マッサージ器)



医療用具承認番号  
21500BZZ00249

マッサージリモコン  
・「マッサージ」ボタン  
マッサージを開始する  
時に押します。  
治療時間は5分・10分・  
15分が選べます。

・「強さ」ボタン  
バイブレーターの強さを  
「弱」「中」「強」の順で調節  
できます。

・「ウェーブ」ボタン  
5秒間隔でバイブレーションが  
移動し、足元から揉み上げられ  
るような効果があります。

・「ポイント」ボタン  
好みのポイントにバイブレー  
ションを固定し治療するこ  
とができます。

電源スイッチ

治療切換スイッチ···「温熱」「電位」「交互」のモードを  
切り替えます。

電位強弱切換スイッチ···電位出力の「強」「弱」を  
切り替えます。

温度調節スライドツマミ···  
「上」「下」の温度が無段階で  
調節できます。

1時間タイマースイッチ···1時間で治療を停止できます。



ふりそそぐ  
リラクゼーション  
シャワー

## 定格・仕様

品 名	組合せ家庭用電気治療器(電位治療器・温熱治療器・電気マッサージ器)		
定 格 電 壓	AC100V 50/60Hz		
各 治 療 時 の 定 格 消 費 電 力	温熱治療時	電位治療時	マッサージ治療時
	195W	6W	12W
治 療 導 子	線面カーボン発熱体		
温 度 調 節 機 構	感熱線によるトライアック制御(電子制御回路)		
保 護 装 置	・温度過昇防止装置(復帰型) ・局部過熱防止回路 ・感熱線短絡検出回路 ・過電流保護回路	・自動温度調節回路 ・感熱線断線検出回路 ・感熱線保護回路	
表 面 温 度	「弱」:28°C 幅1000×長さ2000×厚さ80(mm)	「中」:38°C 幅800×長さ1560×厚さ1(mm)	「強」:47°C タテ200×ヨコ165×厚さ55(mm)
寸 法			
重 量	約11kg		
外 被 材 質	オリジナル生地		
梱 包 形 態	三つ折り		
医療用具承認番号	21500BZZ00249		

※改良のため、本製品は予告なく変更する場合があります。

※使用頻度によってバイブルータ部分に違和感が発生する可能性があります。

## 「安全上のご注意」

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い  
ください。

### 【△危険】(電位治療時)

下記のような医用電子機器との併用は、誤動作を招く恐  
れがありますので使用しないで下さい。

- ペースメーカー等の体内埋込型医用電子機器
- 人工心肺等の生命維持用医用電子機器
- 心電計等の装着型の医用電子機器

### 【注意】

- 病気加療中で体調のすぐれない方は、医師の指示をお  
受けください。
- 温熱治療時、低温やけどの恐れがありますので、乳幼  
児や身体の不自由な方は、周囲の方が使用温度に注意  
してあげてください。
- 本品に万一故障等発生の場合は、お求め先までご一  
報ください。
- 分解や修理・改造を行わないで下さい。

組合せ家庭用電気治療器  
(電位治療器・温熱治療器・電気マッサージ器)



医療用具承認番号 21500BZZ00249

DENKEN

ISO 14001,  
JIS Q 14001  
01104010857

喧騒の中で気づく一瞬の静寂が  
心地よい眠りへといざないます



### 寝たままで 快適操作

マッサージ機能操作部をリモコン式にしました。治療時のタイマー設定、強さや好みのポイントへの切替は、仰向けに寝たままで操作できます。又、マッサージ治療がタイマーによって終了すると、あらかじめセットしておいた温熱・電位治療に自動的に切り替わります。



### 肩までしっかり温熱治療

体質により体調により、使用時の気温により快適治療温度は違います。微細で心地よい温度設定ができる様、発熱体を上半身・下半身に分け、それぞれの温度調節が無段階でセットできるようにしました。肩までしっかり温まりながら理想の頭寒足熱が可能です。



### 選べる気くばり 電位強弱

お客様のお好みにより、電位治療の「強」「弱」をお選びください。体調に合わせた治療を可能した気くばり設計です。

### マッサージ機能付なのに収納は簡単

全身で8箇所のマッサージポイントを備えながら収納時はかんたんに三つ折りにできます。また、本体から電源コードを取り外すことができるので、取扱が便利です。



「ピュアメイト®」と「交互治療®」は DENKEN の登録商標です。

組合せ家庭用電気治療器  
(電位治療器・温熱治療器・電気マッサージ器)




【特許出願中】

医療用具承認番号  
21500BZZ00249

### マッサージ治療

疲れがたまりやすい背骨を中心に、脚、腰、背中を適度にマッサージ。8箇所のバイブルータが心地よく患部をもみ上げる様にほぐします。

- ・血行をよくする
- ・疲労回復
- ・神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
- ・筋肉のコリをほぐし疲れをとる

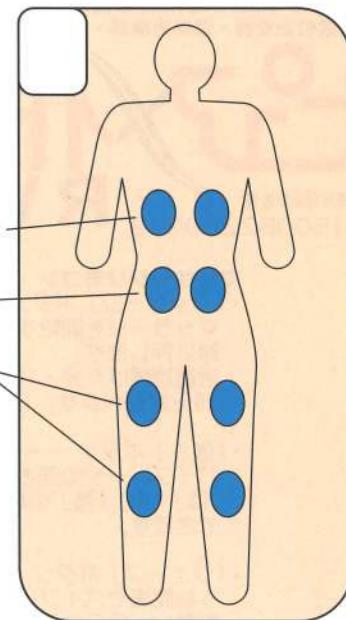


### 温熱治療

睡眠中に体を温める作用の温熱治療！治療導子として使用しているカーボン発熱体がやさしく、ソフトな温かさで包み込みます。 (PAT.No.2114699)

身体に適度な温度を加えると、血管が拡張し、血液やリンパ液の循環がよくなっています。疲労が回復し、筋肉のコリや痛みが和らぎます。腹部を温めると、腸の運動や胃液の分泌が調整されるので、温めるだけで消化器系の不快な症状の改善に効果があります。

- ・血行をよくする
- ・疲労回復
- ・胃腸の動きを活発にする
- ・神経痛・筋肉痛の痛みの緩解
- ・筋肉のコリをほぐし疲れをとる

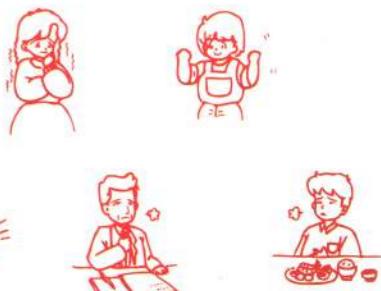

### 電位治療

発熱させないので電気代もほとんどかかりません。刺激感が無く、毎日快適に使えます！体にマイナス電位を与えることにより視床下部付近に影響を与え自律神経機能や内分泌機能並びに生体の恒常性維持に寄与すると言われています。

- ・頭痛
- ・肩コリ
- ・不眠症
- ・慢性便秘




### 親切設計のタイマー管理

それぞれの治療はタイマー管理されています。  
(温熱治療時及び交互治療時:12時間、電位治療時:8時間)  
また、1hスイッチを押すことにより、あのあの1時間治療ができます。  
※交互治療時には、開始後30分間温熱動作で設定温度まで温め、その後5分毎に電位治療と温熱治療が自動的に切り替わります。また、温度調節ツマミを「切」の位置にして、交互治療を行うと5分毎の断続電位治療ができます。

### 交互治療®

温熱と電位。それぞれの特徴ある働きを交互に自動的に行います！その両方の効果が得られます。

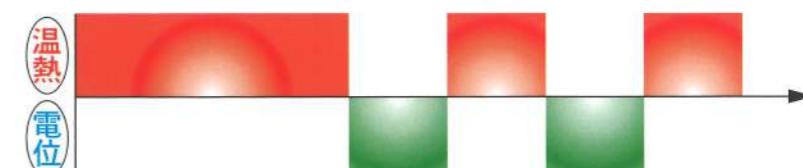

温熱  
電位

温熱  
電位

温熱  
電位