

「安全上の注意」

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

「⚠危険」(電位治療時)

下記のような医用電気機器との併用は誤作動を招く恐れがありますので使用しないでください。

- ペースメーカー等の体内植込み型医用電気機器。
- 心電計等の装着型の医用電気機器。

心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しないでください。

「注意」

- 病気加療中で体調のすぐれない方は、医師の指示をお受けください。
- 温熱治療時、低温やけどの恐れがありますので、乳幼児や身体の不自由な方は、使用しないでください。
- 本品に万一故障等発生の場合は、お買い求め先までご一報ください。
- 分解や修理・改造を行わないでください。

定格・仕様

	シングルサイズ	ダブルサイズ
名称	ピュアメイトS	ピュアメイトW
サイズ	100×200cm	140×200cm
定格電圧	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	195W	250W
治療導子	カーボン発熱体	
温度調節機構	感熱線によるトライアック制御(電子制御回路)	
表面温度	「Lv6」約50℃ 「Lv3」約35℃ 「Lv1」約25℃	
電源コード	約1.6m(小判型)	
出力コード	約1.2m(丸型)	
医療機器認証番号	226AKBZX00004000	226AKBZX00005000

※印刷のため実際の製品の色とは多少異なる場合があります。
※改良のため本製品は予告なく変更する場合があります。

DENKEN

華やぐ
心地よい朝
Puremate



充実した機能と

ふわふわの肌触り

温熱治療

体を温めることで血行を良くし、胃腸の働きを活発にするなどの効果が。さらに筋肉のコリをほぐし、痛みを軽減。体の疲労を回復させることで日々の体調を守ることをお約束します。

(温熱治療の効能効果)

- 血行をよくします。
- 疲労回復
- 神経痛や筋肉痛をやわらげます。



- 筋肉のこりや疲れをほぐします。



- 胃腸の働きを活発にします。



電位治療

電位治療は刺激性のないマイナス電位で、頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘等に効果が期待できます。電位の強さはお好みで-300Vと-600Vに切換えることができ、より快適に健康な体づくりをお手伝いします。

(電位治療の効能効果)

- 頭痛
- 肩こり



- 不眠症
- 慢性便秘



身体に優しい素材

ずっと笑って過ごしてほしいから..



アレルキャッチャー

臭いの原因となる雑菌を抑制し、更にダニや花粉のアレルギー物質を吸着し分解。目に見えない刺激物からお守りすることで、安心の使い心地をお約束します。

(綿:アレルキャッチャーの機能)

消臭効果

汗・加齢臭のいやなニオイを軽減
ホルムアルデヒド・大気汚染物質の分解

抗菌防臭効果

黄色ブドウ球菌など
雑菌の抑制

抗アレルギー物質

ダニ・花粉・ペット・カビの
アレルギー物質を吸着

アレルキャッチャーが目に見えない刺激物からあなたを守り、室内環境を改善する手助けをします!

このアレルギー・有害物質に効く

アレルギー

花粉

ダニの死がい

ダニのフン

ペット

有害物質

ホルムアルデヒド

排気ガス


アレルゲン タンパク質 悪臭分子

モグモグ

無臭分子

いただきます

操作が簡単なコントローラーがデジタル表示で見やすくなりました。(便利なタイマー機能付)

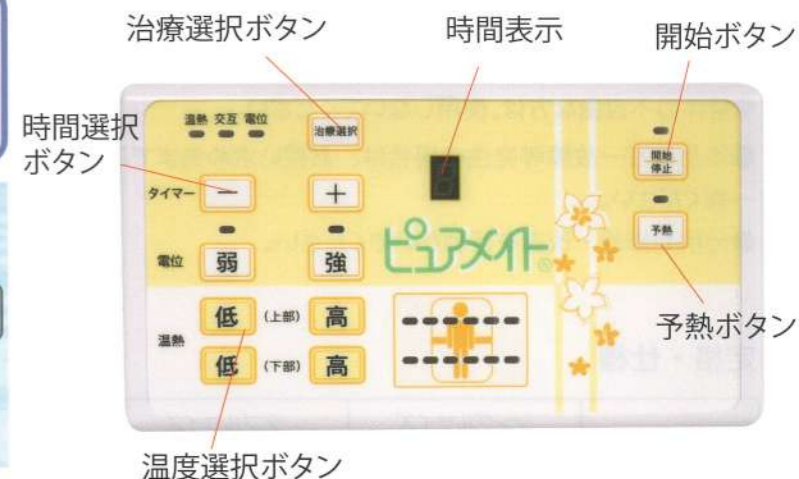

『交互治療』を使うと温熱治療と電位治療を交互に行う事が出来ます。

線面発熱体


カーボン発熱体を使用したヒーターは、安全性、耐久性に優れ、細かく密に配置することで、全体の温度を均一に保ちます。快適な温かさをお約束します。

(ヒーター:発熱体の構造)

全面・上部・下部と温める場所をお好みに合わせて個別に設定する事が出来ます。



カーボン発熱体は異常穴が生じても、それぞれが独立していますので、異常発熱を抑え発火には至りません。(破損部分以外は正常発熱を維持します。)

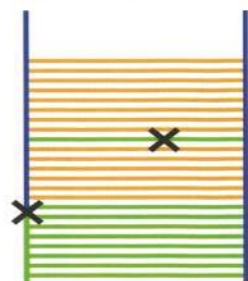

(カラーバリエーション)

肌触りのよいベロア素材の生地の人気ペーズリー柄を型押ししました。カラーは華やかなピンクとベーシックなベージュの2色からお好みに合わせてお選び頂けます。



特殊カーボン線面発熱体はデンケンの特許取得品です。

『ピュアミート®』と『交互治療®』は DENKEN の登録商標です。